


NOTICE D'UTILISATION ABRÉGÉE POUR LE TEST ANTIGÉNIQUE INDIVIDUEL



Produit : SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
Fabricant : Roche

Préparation

Vous devez disposer de ces composants pour réaliser le test :

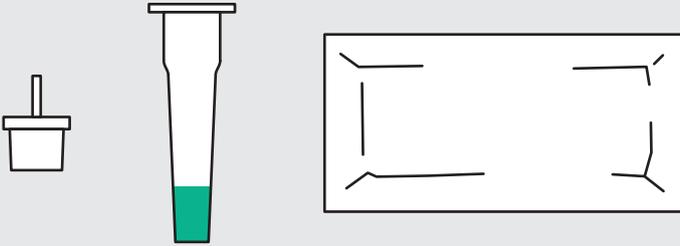


Utiliser pour le prélèvement l'écouvillon disponible séparément (marque : Nasal Swabs, n° mat. 09 421 777 001)




Prélèvement de l'échantillon (à la température ambiante)

1
Introduire l'écouvillon à env. 2 cm de profondeur dans les deux narines, tourner quatre fois et passer sur la muqueuse nasale (env. 15 secondes)

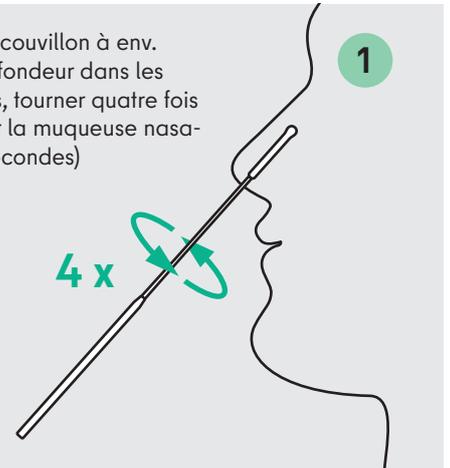

Traitement de l'échantillon

2
Introduire l'écouvillon et tourner plus de dix fois

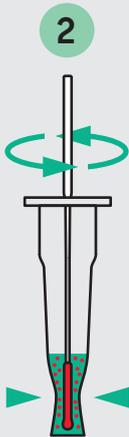


plus de 10 x

Presser le tube contre le tampon pour détacher les antigènes

3
Prélever le tampon en appuyant bien contre la paroi du tube et placer l'embout compte-gouttes



4
Faire tomber quatre gouttes du puits d'échantillon sur la cassette de test

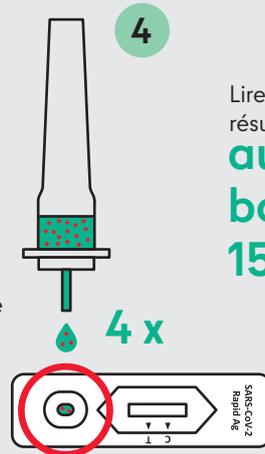



5
Lire le résultat au bout de 15 minutes



Cesser d'évaluer tout résultat au-delà de 30 minutes !


Évaluation des résultats

Chaque nuance de couleur sur la ligne de test (T) doit être considérée comme positive

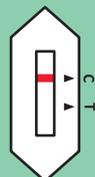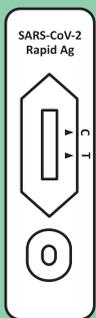


Négatif

Ligne de contrôle en couleur (C)

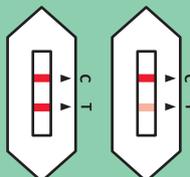

Positif

Ligne de contrôle en couleur (C) et ligne de test (T)

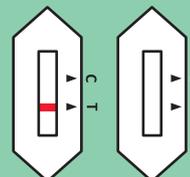

Non valable/imprécis

Aucune ligne de contrôle en couleur (C)

Élimination



Jeter les kits de test à part dans la poubelle des ordures ménagères

Les élèves, ainsi que le personnel des écoles ou des garderies/crèches, peuvent aller à l'école/à la garderie/crèche

– Les parents déclarent l'enfant malade auprès de l'école ou le personnel de l'école ou de la garderie/crèche se met en congé maladie
– Les élèves ainsi que le personnel de l'école ou de la garderie/crèche font pratiquer un post-test PCR dans l'un des centres de dépistage

Renouveler le test de dépistage avec du matériel neuf